


Ultrasonic Height Fat Analyzer
花潮超声波身高体脂分析仪

SCALE

通用说明书

时尚科技 品质生活


■ 组成部分

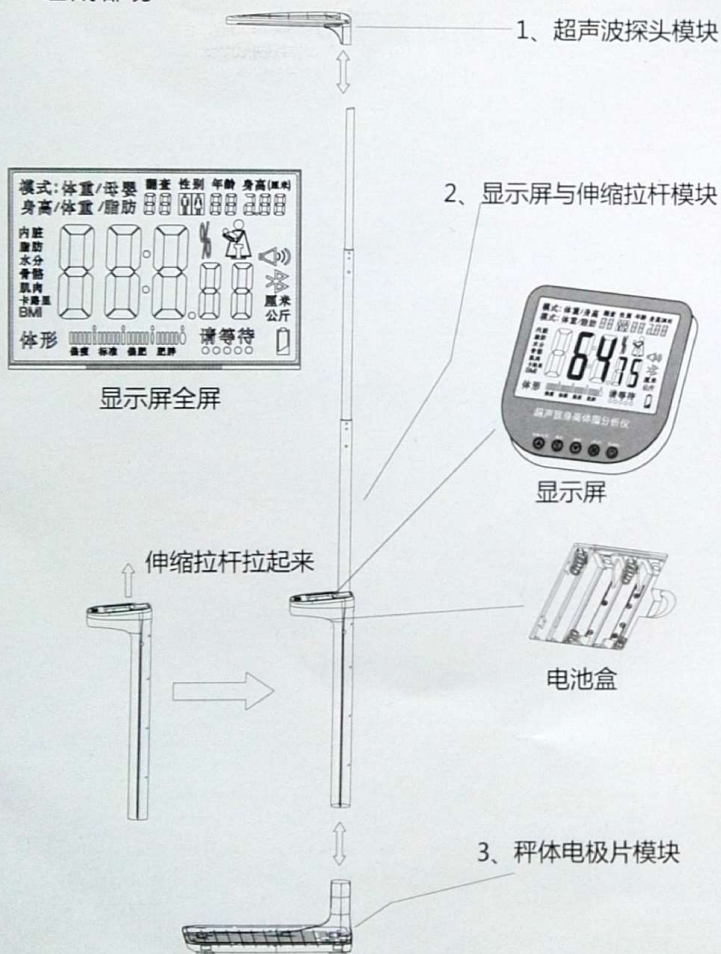

■ 产品特点

- 选用高精度传感器
- 内置优质8mm钢化安全玻璃
- 称量范围：5-200公斤
(起称后称重范围可达：0.3-200公斤)
- 分度值：50克
- 身高测量范围：80-195厘米
(身高分度：0.5厘米)
- 102.5*67.5mm LCD带背光显示
- 测量身高功能
- 脂肪测量分析功能
- 母婴体重功能
- 语音报读功能
- 数据记录/翻查功能
- 自动上称 连续称重
- 自动零点追踪
- 低电压/超载提示

■ 使用电源

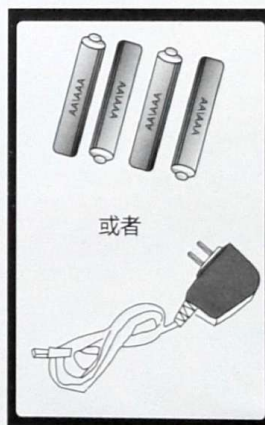


1. 本产品使用4节7号电池或直流电源DC6V-12V1A供电，请在购买本产品之后，将显示器底部的电池盖打开，将4节7号电池安装到秤体内或插上DC电源；


2. 电池和电源不能同时使用；

3. 长期不使用本产品，请取下电池；

■ 使用方法

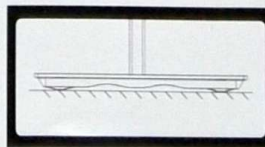

1. 将体脂分析仪放在硬实、平整的地板上（地板不平或地毯会影响准确度）。

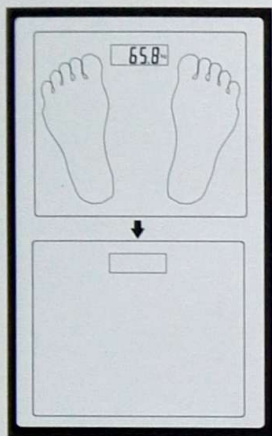

2. 正常使用时，可直接上体脂分析仪。测量脂肪时，请脱去鞋袜，双脚保持干燥，分别站到电极片上。

3. 请平稳地踏上体脂分析仪上，保持身体平衡，待站稳后，体脂分析仪即可显示体重和播报体重值，稍等片刻后，体脂分析仪会再显示身高和播报身高。

4. 每次测量时，身高显示稳定10秒会返回到归零显示，归零显示8秒后体脂分析仪会自动关机。

■ 操作说明

(1)开/关机：直接上体脂分析仪可自动开机，测量完10秒后自动关机；也可选择手动按“开/关机”键进行开关机。

(2)转换单位：按“公斤/斤”键进行单位转换。

(3)查看测量数据：A、第一次按“翻查”键，进入翻查模式。

B、在翻查模式状态下，按“▲”或“▼”键翻查记忆数据。

(4)语音功能开关

在称重状态下，按“▲”键可以打开或关闭语音，语音功能打开时，在称重状态下屏幕右上角会显示“🔊”符号。

(5)模式选择

按开机键，开机后，显示屏左上角的“模式”闪动，按“模式”按键进入模式选择状态再按“▲”或“▼”；交替选择所要模式：体重，体重/母婴，体重/身高，体重/脂肪，体重/身高/脂肪，五种模式(系统默认为体重/身高模式)。选定模式后，进入相应的模式进行测量。

(一)体重模式

关机时，人站上去，体脂分析仪会自动开机，2-3秒锁定并显示体重，同时语音报出当前体重。

(二)体重/母婴模式(例如大人重量为60kg，婴儿重量为8kg)

此功能可以一次秤出：大人重量，婴儿重量。

1、大人站上去，显示60kg，同时语音报出当前体重。

2、重量锁定后，等待2-3秒，自动进入母婴模式，显示0.0kg。

3、大人走下体脂分析仪去抱婴儿时，显示负重量“---”。

4、大人抱婴儿站上去后，锁定并显示婴儿重量8kg，同时语音报出当前体重，显示母婴符号。

(三)体重模式/身高模式：

关机时，人站上去，体脂分析仪自动开机并显示当前体重，同时语音报重；稍等片刻，测量身高，测量完毕，语音报读身高。

(四)体重/脂肪模式：(身高手动输入)

1、按“模式”键进入设置资料模式；用“▲”、“▼”键上下选定设置信息(身高要按照提示进行手动输入)；然后进入称重、测脂模式。




2、在正确测量结束后，只显示体重和脂肪值及体形，同时语音报体重和脂肪值；如果需要看水分、肌肉、骨骼、卡路里和BMI值，需要手动按“▲”键“▼”键，逐个查看。

3、若脂肪率小于5%，出FL0画面 **FL0** 若脂肪率大于50%，出FHI画面；**FHI** 若测量出错，出FErr画面。**FErr**

(五)体重/脂肪模式：(身高自动测量)

自动完成体重，身高，体脂的测量，具体参考上面的(三)，(四)项的介绍。

■ 低电压 / 超载提示:

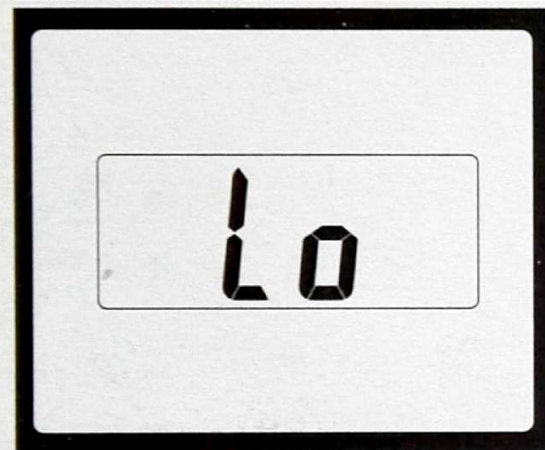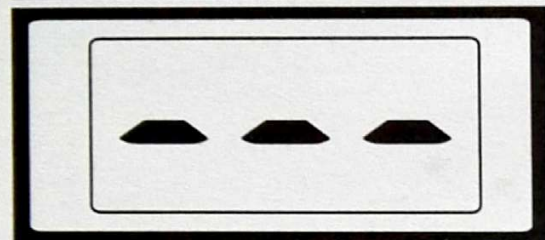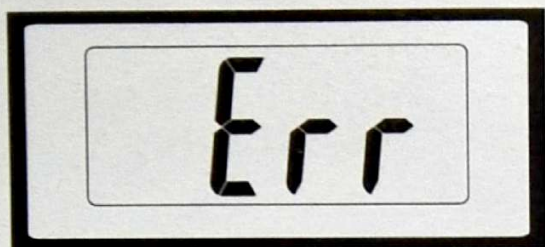

■ 超载提示

如果体重超过量程 (200公斤), 体脂分析仪会显示左侧提示;

■ 如果身高不在量程内 (80~195厘米) , 体脂分析仪会显示左侧提示;

■ 更换电池

电池电量不足时, 屏幕会显示 "Lo" 符号2秒后关机, 表示须更换电池或插上DC电源插头, 否则无法继续正常使用。

更换电池时, 将显示器底部的电池盖打开, 将旧电池取出, 更换上新电池。

■ 保养指南

- 本产品为精密仪器，小心轻放,勿敲打、撞击、跌落产品；
- 称重过程保持静态；
- 注意保持承载面的干燥，防止打滑摔倒；
- 用微湿布清洁产品，避免水进入秤体内，勿用化学/腐蚀性清洁剂；
- 水平置于凉爽干燥处；
- 如不能开机，请检查电池是否安装，或电量是否充足；
- 如产品显示错误且长时间不能关机，请将电池取下3秒后重新装上，如仍未能解决问题，请联系销售商；
- 长时间不使用，请取出电池；
- 本产品为人体称重而设计，不能用于商业称重；
- 本产品工作温度在0-40度。

■ 保修指南

- 购买产品后，如对本产品以及我们的服务有任何建议，
- 请登录我司网站填写好相应的反馈信息；
- 请妥善保存保修凭证；
- 下列情况不免费维修：
消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的、因不可抗力造成损坏的；
非承担三包修理者拆动造成损坏的；
无有效三包凭证的；

体重与身高国际通行标准

身高	体重（KG）男	体重（KG）女
188	81-92	68-78
184	77-89	66-75
180	74-85	64-71
178	73-82	62-69
174	70-79	59-66
170	67-74	56-64
168	66-72	55-62
164	63-69	52-59
160	60-66	50-56
158	58-64	49-55
154	56-62	47-53
150	54-60	45-51

脂肪参考标准

男性

年龄	偏瘦 (Underfat)	标准 (Healthy)	偏肥 (Overfat)	肥胖 (Obese)
<20	<12.0	12.0-20.0	21.0-29.0	>29.0
20-30	<13.0	13.0-21.0	22.0-30.0	>30.0
30-40	<15.0	15.0-23.0	24.0-32.0	>32.0
40-50	<16.0	16.0-24.0	25.0-33.0	>33.0
50-60	<17.0	17.0-25.0	26.0-34.0	>34.0
>60	<18.0	18.0-26.0	27.0-35.0	>35.0

女性

年龄	偏瘦 (Underfat)	标准 (Healthy)	偏肥 (Overfat)	肥胖 (Obese)
<20	<17.0	17.0-25.0	26.0-34.0	>34.0
20-30	<17.0	17.0-25.0	26.0-34.0	>34.0
30-40	<19.0	19.0-27.0	28.0-36.0	>36.0
40-50	<20.0	20.0-28.0	29.0-37.0	>37.0
50-60	<21.0	21.0-29.0	30.0-38.0	>38.0
>60	<21.0	21.0-29.0	30.0-38.0	>38.0

沿虚线剪下

保修卡

客 户 资 料

产品名称		产品型号	
购买日期		购买商店	
经销商盖章			
顾客姓名		顾客电话	
顾客地址			

维 修 记 录

维修日期	故障描述	维修地点	维修结果

公司名称：上海花潮电器有限公司
地址：上海市青浦区新府中路1331弄33号四层
全国统一售后服务电话：400-021-6368
网址：www.huachao.net.cn
总机：86-21-59772255
传真：86-21-59778037

本资料内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。